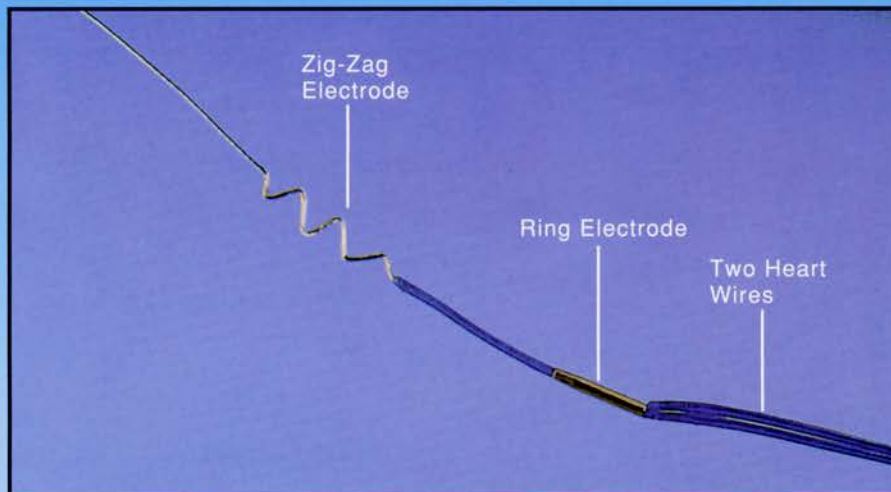
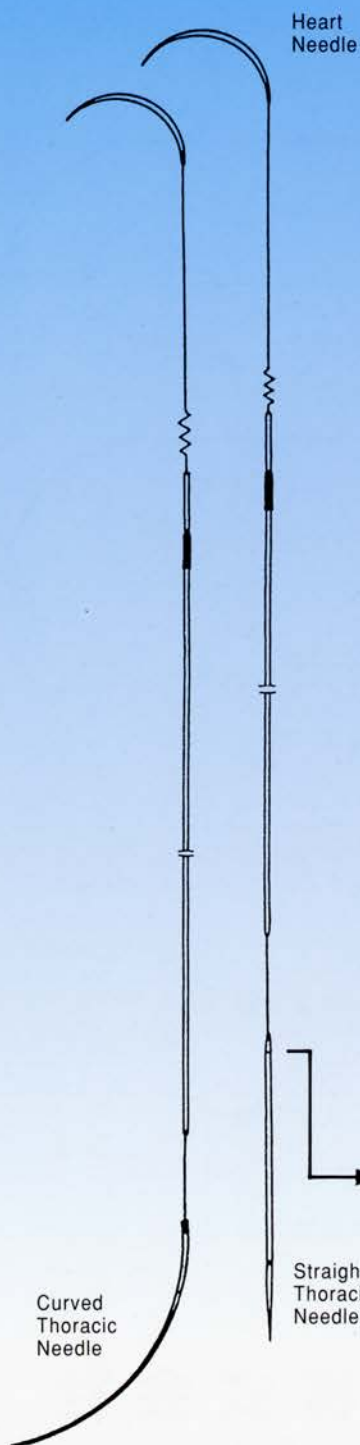


オスコー バイポーラ ハート ワイヤ

承認番号: 20200BZY00288

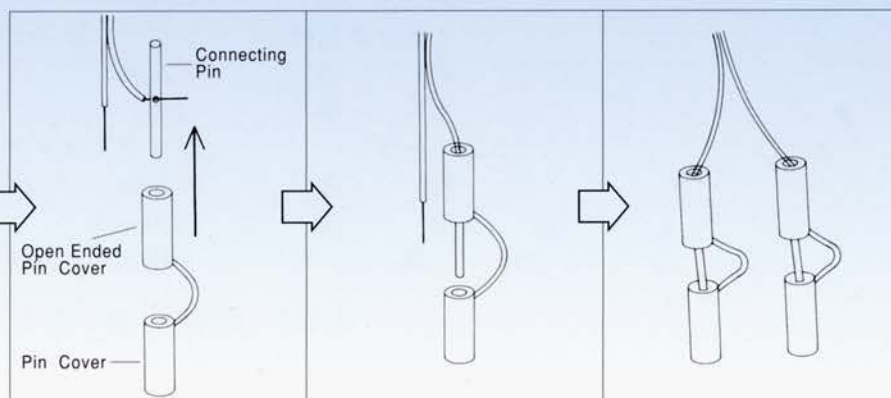


オスコー バイポーラ ハート ワイヤは1本を刺入するだけで2つの電極が心筋層に接触し心臓手術中、又は術後、の心拍を確保することができます。

使い捨て、E.O.ガス滅菌済み。

心房用と心室用があります。

下図のように付属のコネクタ用アダプタセットを使って端子をつくれますので接続に便利です。

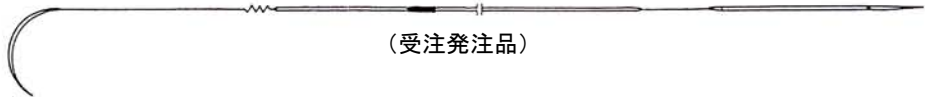
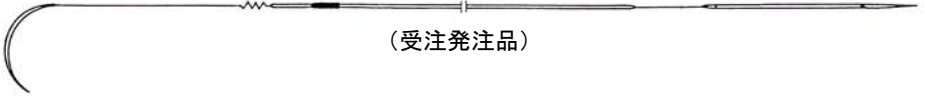
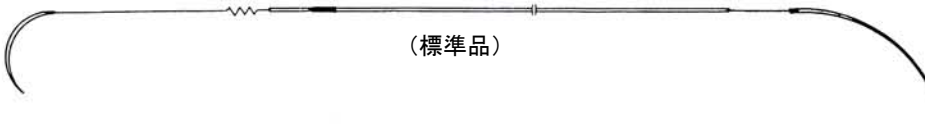
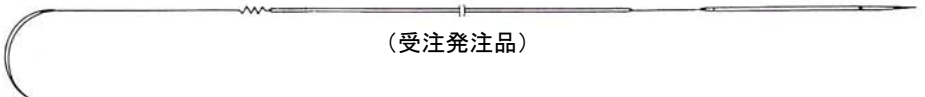
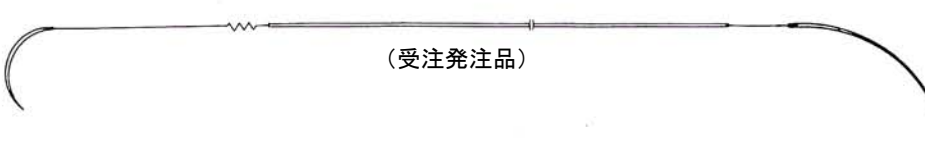


本商品はPL保険に加入しています。

"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"

TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

オスコー バイポーラ ハート ワイヤ

| | | | |
|-------|-------------------|---|---------|
| バイポーラ | TME64S-3 (心房用) |  | (受注発注品) |
| | TME64S TME65S |  | (受注発注品) |
| | TME64C TME65C |  | (標準品) |
| ユニポーラ | TME60S TME61S |  | (受注発注品) |
| | TME60C TME61C |  | (受注発注品) |

注) TME60と61、64と65は絶縁材の色が違うだけです。

仕様

| | |
|--------------|--------------------|
| 長さ | 60cm |
| ワイヤ | ステンレススチール |
| 絶縁材 | ポリエチレン |
| 電極 | |
| [バイポーラ] | |
| プロキシマル電極 | ステンレススチール |
| 直径 | 0.8mm |
| 面積 | 12mm ² |
| ディスタル電極 | ジグザグ状ステンレスより線 |
| 直径 | 0.25mm |
| 面積 | 12mm ² |
| [ユニポーラ] | ジグザグ状ステンレスより線 |
| 直径 | 0.3mm |
| 面積 | 約20mm ² |
| 包装 | 1箱25本入E.O.ガス滅菌済み |
| 使用は1回限り、使い捨て | |

製造販売元

大正医科器械株式会社
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
 TEL 06-6553-9666 (代)
 FAX 06-6553-9305

東京出張所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-14-21
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
 E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…