


Alpha medical

(米国/アルファ メディカル社)

Spring Guidewires

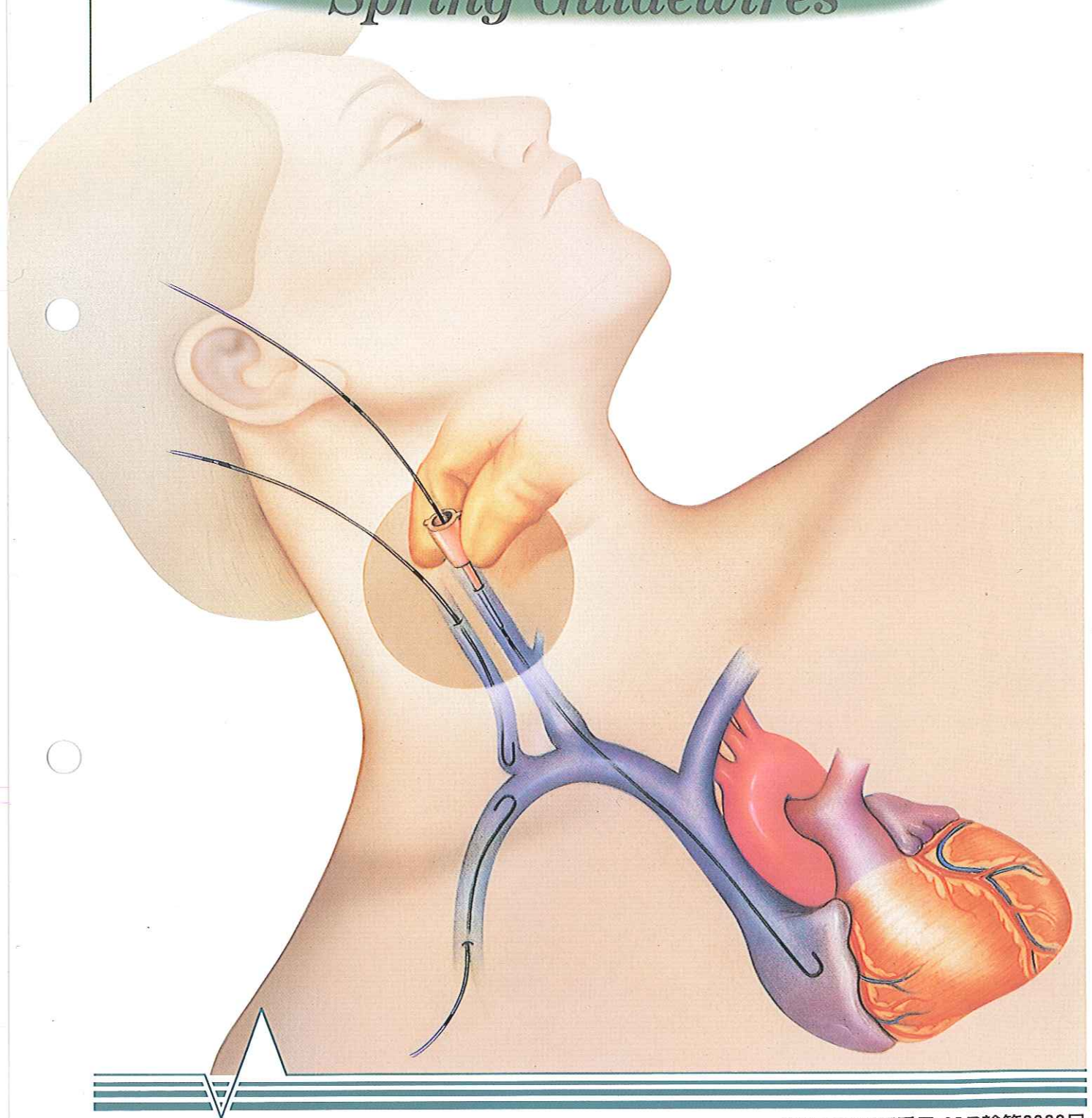

医療用具承認番号 61B輸第0939号

"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"



日本総代理店

大正医科器械株式会社

TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

You'll Love It For Its Forgiving Ways


この新しいガイドワイヤーの優れた特徴により、全ての診断及び、インターベンショナル検査を、よりスムーズに進めることができます。

1 新テフロン・コート

極めて薄いテフロン層の効果によってワイヤー全体に滑らかな均一のコーティングがほどこされています。

この新しいコーティングにより、ガイドワイヤーの機能を損なうことなく、滑らかさをさらに高めることができます。

穿刺針を用いても、この高度な耐久性のあるコーティングにより、ガイドワイヤーの破損を守ります。

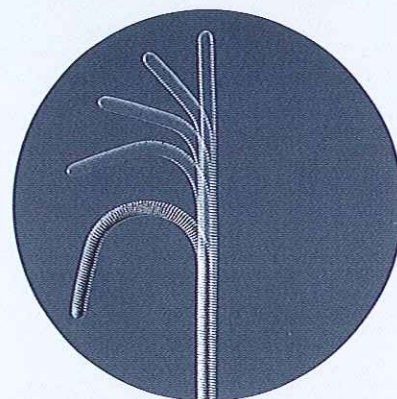

2 新テーパー設計

新テーパー設計により先端チップが、最大の柔軟性を発揮し、必要なテーパーコア圧力の移行がさらに可能となります。

チップの柔軟性と優れたテーパーコアの移行性が、血管内損傷を最小限にし、患者の安全性を確保します。

3 J型チップ設計

独自のJ型チップ設計により、ニードル・カニューラにすばやく挿入できるようJ型チップを簡単にまっすぐ伸ばせます。血管内に挿入する際J型チップは、メモリにより元の形に戻ります。J型チップデザインは、固定式・可動式ともに多様なサイズを取り揃えています。

4 J型ストレナー

穿刺針ハブにJ型チップ先端を位置決めできるように螺旋状ホルダーには、ストレナーがついています。

5 ガイドワイヤーホルダー

螺旋状ガイドワイヤーホルダーは、「シングル・ループ」状のため、ワイヤーがよじれたり摩擦するのを防ぎます。螺旋状ホルダーの末端には、ヘパリン加生理食塩水でフラッシングが簡単にできるようにルーアハブが取り付けられています。

スプリングガイドワイヤー

医療用具承認番号 618給 第0939号

型式	規格	サイズ	長さ
GW-0016	固定式・ストレート型	0.021"	125cm
GW-0017	スタンダードテーパー	0.025"	150cm
GW-0641	(先端から5cmまでやわらかい)	0.025"	125cm
GW-0644		0.032"	125cm
GW-0645		0.032"	150cm
GW-005		0.035"	125cm
GW-006		0.035"	150cm
GW-007		0.038"	125cm
GW-008		0.038"	150cm
GW-0049		0.045"	150cm
GW-0629		0.035"	175cm
GW-0630		0.038"	175cm
GW-0632		0.038"	260cm
GW-0633		0.035"	260cm
GW-0018	固定式・ストレート型	0.032"	125cm
GW-0467	10cmテーパー	0.035"	150cm
GW-0642	(先端から10cmまでやわらかい)	0.038"	150cm
GW-0468	固定式・ストレート型 15cmテーパー	0.035"	150cm
GW-0643	(先端から15cmまでやわらかい)	0.038"	150cm
GW-0215	固定式・J型	0.025"	125cm
GW-0205	1.5mm	0.025"	150cm
GW-0206		0.032"	150cm
GW-0208		0.035"	150cm
GW-0209		0.038"	150cm
GW-0211		0.035"	175cm
GW-0212		0.038"	175cm
GW-0150	固定式・J型	0.021"	125cm
GW-0050	3.0mm	0.025"	125cm
GW-0065		0.035"	150cm
GW-0080		0.025"	150cm
GW-0090		0.032"	150cm
GW-001		0.035"	125cm
GW-002		0.038"	125cm
GW-003		0.038"	150cm
GW-004		0.038"	150cm
GW-0827		0.035"	175cm
GW-0828		0.038"	175cm
GW-0861		0.035"	260cm
GW-0863		0.038"	260cm
GW-0742	固定式・J型	0.035"	125cm
GW-0744	6.0mm	0.035"	150cm
GW-0743		0.038"	150cm
GW-0551	固定式・J型	0.035"	150cm
GW-0552	15.0mm	0.038"	150cm
GW-013	可動式・ストレート型	0.032"	150cm
GW-011		0.035"	150cm
GW-012		0.038"	150cm
GW-0927	固定式・J型	0.032"	125cm
GW-0928	3.0mm アンブランツ型	0.032"	150cm
GW-0931		0.035"	125cm
GW-0934		0.035"	150cm
GW-010		0.038"	150cm
GW-0758	可動式・J型 6.0mm	0.035"	150cm

日本総代理店
大正医科器械株式会社
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO.,LTD.

営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22岡田ビル
 TEL 06-6553-9666(代)
 FAX 06-6553-9305
 技術部 TEL 06-6553-9637
 本社 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東1-13-17
 東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田2-10-1-206
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
 E-mail sales-jp@taishobiomed.com

大正医科器械(株)本社営業部は「ISO9001」「ISO13485」を取得しています。

お求め、お問い合わせは……

※製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承下さい。

1999.8.3000 (DA)