


Alpha medical

(米国/アルファ メディカル社)

Spring Guidewires

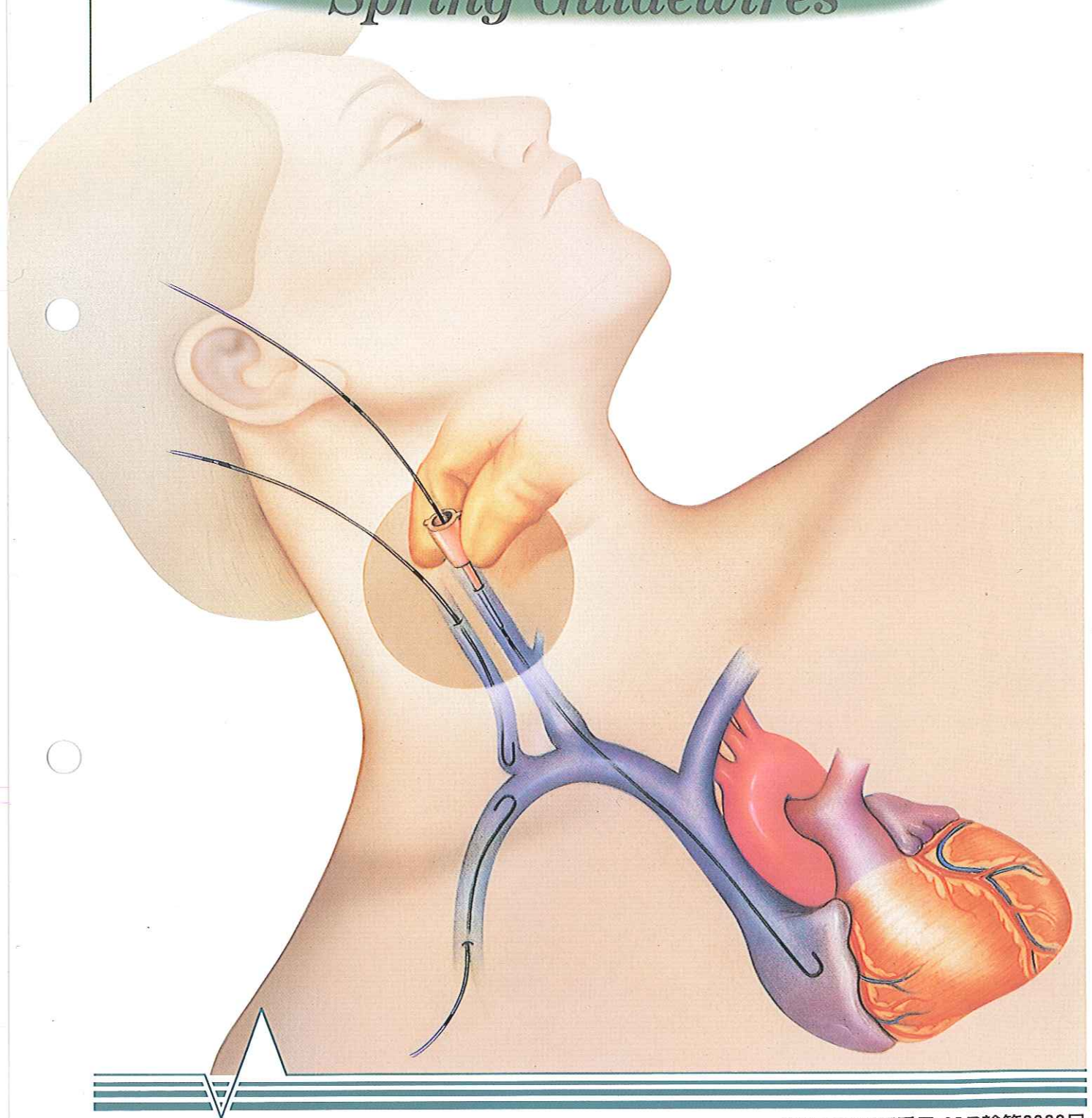

医療用具承認番号 61B輸第0939号

"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"



日本総代理店

大正医科器械株式会社

TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

You'll Love It For Its Forgiving Ways


この新しいガイドワイヤーの優れた特徴により、全ての診断及び、インターベンショナル検査を、よりスムーズに進めることができます。

1 新テフロン・コート

極めて薄いテフロン層の効果によってワイヤー全体に滑らかな均一のコーティングがほどこされています。

この新しいコーティングにより、ガイドワイヤーの機能を損なうことなく、滑らかさをさらに高めることができます。

穿刺針を用いても、この高度な耐久性のあるコーティングにより、ガイドワイヤーの破損を守ります。

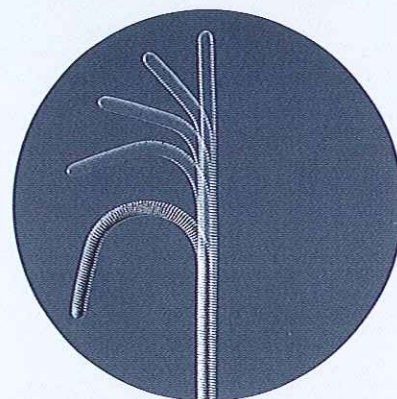

2 新テーパー設計

新テーパー設計により先端チップが、最大の柔軟性を発揮し、必要なテーパーコア圧力の移行がさらに可能となります。

チップの柔軟性と優れたテーパーコアの移行性が、血管内損傷を最小限にし、患者の安全性を確保します。

3 J型チップ設計

独自のJ型チップ設計により、ニードル・カニューラにすばやく挿入できるようJ型チップを簡単にまっすぐ伸ばせます。血管内に挿入する際J型チップは、メモリにより元の形に戻ります。J型チップデザインは、固定式・可動式ともに多様なサイズを取り揃えています。

4 J型ストレナー

穿刺針ハブにJ型チップ先端を位置決めできるように螺旋状ホルダーには、ストレナーがついています。

5 ガイドワイヤーホルダー

螺旋状ガイドワイヤーホルダーは、「シングル・ループ」状のため、ワイヤーがよじれたり摩擦するのを防ぎます。螺旋状ホルダーの末端には、ヘパリン加生理食塩水でフラッシングが簡単にできるようにルーアハブが取り付けられています。

スプリングガイドワイヤー

医療用具承認番号 618給 第0939号

| 型式 | 規格 | サイズ | 長さ |
|---------|---------------------|--------|-------|
| GW-0016 | 固定式・ストレート型 | 0.021" | 125cm |
| GW-0017 | スタンダードテーパー | 0.025" | 150cm |
| GW-0641 | (先端から5cmまでやわらかい) | 0.025" | 125cm |
| GW-0644 | | 0.032" | 125cm |
| GW-0645 | | 0.032" | 150cm |
| GW-005 | | 0.035" | 125cm |
| GW-006 | | 0.035" | 150cm |
| GW-007 | | 0.038" | 125cm |
| GW-008 | | 0.038" | 150cm |
| GW-0049 | | 0.045" | 150cm |
| GW-0629 | | 0.035" | 175cm |
| GW-0630 | | 0.038" | 175cm |
| GW-0632 | | 0.038" | 260cm |
| GW-0633 | | 0.035" | 260cm |
| GW-0018 | 固定式・ストレート型 | 0.032" | 125cm |
| GW-0467 | 10cmテーパー | 0.035" | 150cm |
| GW-0642 | (先端から10cmまでやわらかい) | 0.038" | 150cm |
| GW-0468 | 固定式・ストレート型 15cmテーパー | 0.035" | 150cm |
| GW-0643 | (先端から15cmまでやわらかい) | 0.038" | 150cm |
| GW-0215 | 固定式・J型 | 0.025" | 125cm |
| GW-0205 | 1.5mm | 0.025" | 150cm |
| GW-0206 | | 0.032" | 150cm |
| GW-0208 | | 0.035" | 150cm |
| GW-0209 | | 0.038" | 150cm |
| GW-0211 | | 0.035" | 175cm |
| GW-0212 | | 0.038" | 175cm |
| GW-0150 | 固定式・J型 | 0.021" | 125cm |
| GW-0050 | 3.0mm | 0.025" | 125cm |
| GW-0065 | | 0.035" | 150cm |
| GW-0080 | | 0.025" | 150cm |
| GW-0090 | | 0.032" | 150cm |
| GW-001 | | 0.035" | 125cm |
| GW-002 | | 0.038" | 125cm |
| GW-003 | | 0.038" | 150cm |
| GW-004 | | 0.035" | 175cm |
| GW-0827 | | 0.038" | 175cm |
| GW-0828 | | 0.035" | 260cm |
| GW-0861 | | 0.038" | 260cm |
| GW-0863 | | 0.038" | 260cm |
| GW-0742 | 固定式・J型 | 0.035" | 125cm |
| GW-0744 | 6.0mm | 0.035" | 150cm |
| GW-0743 | | 0.038" | 150cm |
| GW-0551 | 固定式・J型 | 0.035" | 150cm |
| GW-0552 | 15.0mm | 0.038" | 150cm |
| GW-013 | 可動式・ストレート型 | 0.032" | 150cm |
| GW-011 | | 0.035" | 150cm |
| GW-012 | | 0.038" | 150cm |
| GW-0927 | 固定式・J型 | 0.032" | 125cm |
| GW-0928 | 3.0mm アンブランツ型 | 0.032" | 150cm |
| GW-0931 | | 0.035" | 125cm |
| GW-0934 | | 0.035" | 150cm |
| GW-010 | | 0.038" | 150cm |
| GW-0758 | 可動式・J型 6.0mm | 0.035" | 150cm |

日本総代理店

大正医科器械株式会社
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO.,LTD.

営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22岡田ビル
 TEL 06-6553-9666(代)
 FAX 06-6553-9305
 技術部 TEL 06-6553-9637
 本社 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東1-13-17
 東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田2-10-1-206
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
 E-mail sales-jp@taishobiomed.com

大正医科器械(株)本社営業部は「ISO9001」「ISO13485」を取得しています。

お求め、お問い合わせは……

※製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承下さい。

1999.8.3000 (DA)