


Alpha medical

アルファメディカル社

Bipolar Balloon Pacing Catheters

バルーン付双極電極ペーシングカテーテル

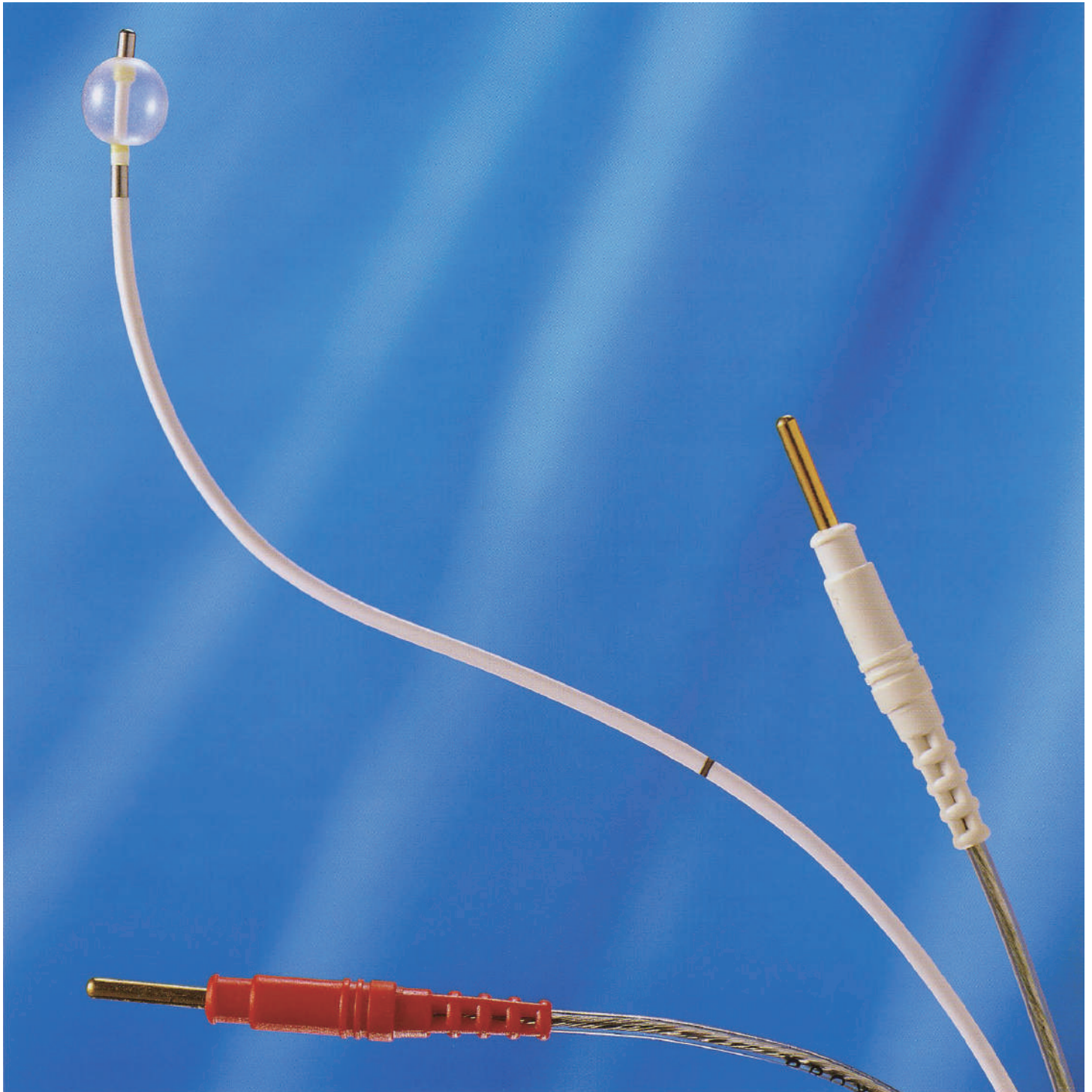


医療機器承認番号 20500BZY00084000
販売名 一時ペーシングカテーテル

最先端の技術力が、正確性と信頼性に活かされています

- カテーテルは、体外式ペースメーカーからのペーシングパルスを送ると同時に心電位を取り出し、心電計に記録する役割をします。
- カテーテル材質はポリウレタンのため、血液適合性がよく抗血栓性であり、また、放射線不透過性のため、X線透視下ではカテーテル部位がより明確になります。
- カテーテルの電極は、高品質ステンレス電極を使用しているため、確実なペーシングができます。
- カテーテルには10cm間隔でマークがあるため、挿入部位がはっきり確認できます。
- 先端部の電極で心内心電図をモニターすることにより、容易にカテーテル先端の位置を確認できます。

ペーシング用カテーテル挿入中の心内心電図

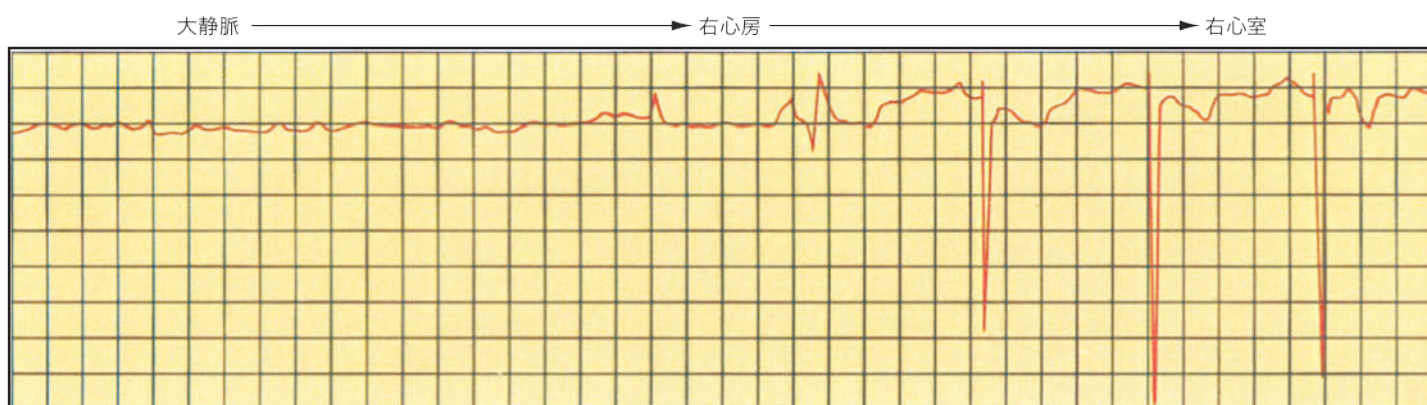

仕様

モデル番号	カテーテル長	カテーテルサイズ	電極間隔	最大バルーン膨張容量	材質	先端形状
7425	110cm	5Fr.	1cm	1.0cc	ポリウレタン	MA
7445	90cm	5Fr.	1cm	1.0cc	ポリウレタン	MA
7425/J	110cm	5Fr.	1cm	1.0cc	ポリウレタン	J

製造販売元

 **大正医科器械株式会社**
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22
TEL 06-6553-9666 (代)
FAX 06-6553-9305
東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…