

経食道 ペーシングカテーテル ESOシリーズ

非観血的で、より低侵襲なペーシング治療が可能です。



医療機器承認番号 21400BZY00253000

販売名 経食道ペーシングカテーテル



“SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS”

大正医科器械株式会社


TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

特 長

- スタイレット付きタイプはカテーテルにコシを与え、患者への挿入が容易になります。(図1)
- カテーテルボディにはマーカが施されており、位置決めが簡単です。(図2)
- 患者の負担を軽減するためリードの外径を抑えました。
- 先端電極間隔はバリエーションがあります。(図2)
- リード先端がシリコン製で柔らかくなっています。(図3)



(図1)

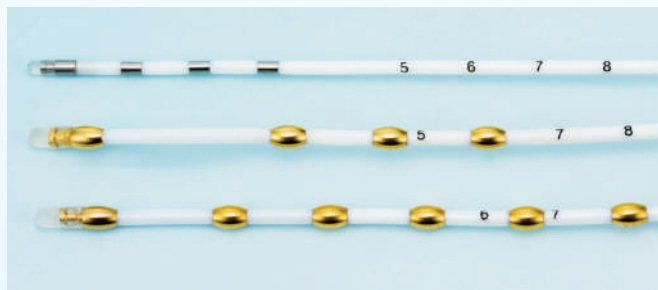

(図2)



(図3)

仕 様

製 品 名		ESOKID 4S	ESOGOLD 4S	ESOGOLD 6S
製 品 コード		25145ES	27145S	27165S
カテーテル ボディ仕様	外 径	2.0mm (6Fr.)	2.3mm (7Fr.)	2.3mm (7Fr.)
	有 効 長	75cm	75cm	75cm
	ボディ材質	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン
電 極 仕 様	極 数	4	4	6
	間隔 (mm)	10, 10, 10	30, 15, 15	20, 15, 15, 15, 15
	電極部直径	2.0mm (6Fr.)	3.6mm (11Fr.)	3.6mm (11Fr.)
	表 面 積	各々25mm ²	各々57mm ²	各々57mm ²
	電極材質	ステンレス	金メッキ 真ちゅう	金メッキ 真ちゅう
そ の 他	電極形状	フラット	卵 形	卵 形
	スタイレット マーカ	無 し 有 り	有 り 有 り	有 り 有 り

関連商品

経食道ペースメーカー:2007JP



医療機器承認番号 21400BZY00119000
販 売 名 携帯型食道ペースメーカ

製造販売元

 **大正医科器械株式会社**
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22 岡田ビル
TEL 06-6553-9666(代) FAX 06-6553-9305

URL: <http://www.taishobiomed.com>
E-mail: home@taishobiomed.com

大正医科器械(株)本社営業部は「ISO9001」「ISO13485」を取得しています。

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御承ください。

2016.9.300(M.C)